



LEUFEN
creating stability

a bess group company

aerstent®
tamamı silikon kaplı
uzun dönemli
nitinol stent



aerstent® TBS Trakeal-Bronşiyal-Stent

Leufen Medical, çapları 10 ila 22 mm ve uzunlukları 20 ila 80 mm arasında olan kendinden genişleyen trakeal ve bronş stentleri sunmaktadır.

TBS stentler, atravmatik uçlar ve göçü önlemeye yardımcı olan güçlü bir radyal kuvvet gibi tasarım özelliklerine sahiptir.

Trakeal ve bronş stentleri yeniden yüklenebilir kendinden yüklü stentlerdir. Hassas bir şekilde konumlandırılması için, stent implantasyon sırasında yükleme sistemi içine geri çekilebilir.

aerstent® TBS hem iç hem dış yüzeyi tamamen silikon kaplı				
REF	Uzunluk (mm)	Kaplama (mm)	Ø Orta (mm)	Ø Uç (mm)
503-10-020	20	20	10	12
503-10-030	30	30	10	12
503-12-020	20	20	12	14
503-12-040	40	40	12	14
503-14-020	20	20	14	16
503-14-030	30	30	14	16
503-14-040	40	40	14	16
503-16-030	30	30	16	18
503-16-040	40	40	16	18
503-16-050	50	50	16	18
503-16-060	60	60	16	18
503-16-080	80	80	16	18
503-18-030	30	30	18	20
503-18-040	40	40	18	20
503-18-050	50	50	18	20
503-18-060	60	60	18	20
503-18-080	80	80	18	20
503-20-040	40	40	20	22
503-20-050	50	50	20	22
503-20-060	60	60	20	22
503-20-080	80	80	20	22
503-22-060	60	60	22	24



özellikler


- Tamamen silikon kaplı
- Atravmatik uçlar
- Nitinol özelliğiyle yüksek radyal güç
- Yeniden yükleyebilme sistemi
çalışma uzunluğu 600 mm,
OTW Ø 6 mm / 18 French:
(stent Ø 10, 12 und 14 mm)
Ø 8 mm / 24 French:
(stent Ø 16, 18, 20 und 22 mm)

aerstent® TBY Y-Karina-Stent

Y karina-stent, trakea ve sağ veya sol ana bronşta benign veya malign stenozların köprülendirilmesi için kullanılır.

Y carina stentleri trakeal kesitte 16 ila 20 mm çapında mevcuttur.
Y carina-stent 8 mm'lik bir iletim sistemine önceden yüklenmiştir.

Y karina stentin implantasyonu için, en az 10 mm'lik bir iç çapa sahip bir trak kullanılarak rijit entübasyon önerilir.

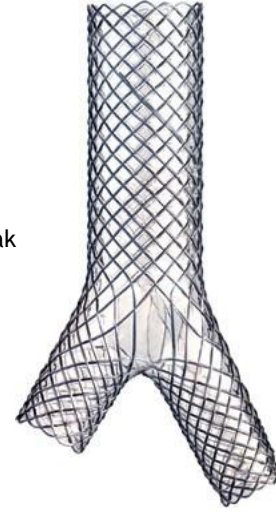

özellikler

- Kısmi Poli üretan kaplı stent (sağ bronş 5 mm açıkta)
- Atravmatik uçlar
- Anatomik olarak doğru, konik tasarım
- Nitinol, yüksek radyal kuvvet
- Radyopak tantal belirteçleri
- Yeniden yüklenebilir
- Çalışma uzunluğu 600 mm, OTW Ø 8 mm / 24 French
- Kılavuz telini 0,035 inç kabul eder

aerstent® TBY poliüretan kaplı (sağ bronş 5 mm kapsız)

REF	Trakea (mm)		Sağ bronş (mm)		Sol bronş (mm)	
512-16-040	Ø 16	L 40	Ø 12	L 20	Ø 12	L 30
512-18-040	Ø 18	L 40	Ø 12	L 20	Ø 12	L 30
512-18-050	Ø 18	L 50	Ø 14	L 20	Ø 14	L 30
512-20-050	Ø 20	L 50	Ø 14	L 20	Ø 14	L 30
522-16-040	Ø 16	L 40	Ø 12	L 15	Ø 12	L 30
522-18-040	Ø 18	L 40	Ø 12	L 15	Ø 12	L 30
522-18-050	Ø 18	L 50	Ø 14	L 15	Ø 14	L 30
522-20-050	Ø 20	L 50	Ø 14	L 15	Ø 14	L 30


aerstent® TBJ J-Karina-Stent

Aerstent® TBJ, anastomoz sızıntısını köprülemek veya pnömonektomiden sonra fistülü örtmek için kullanılır.

J-Karina-stent, kendinden yüklü, yeniden yüklenebilir bir stentdir. Hassas bir şekilde konumlandırılması için, stent implantasyon sırasında yükleme sistemi içine geri çekilebilir.

özellikler

- Tamamen silikon kaplamalı stent
- Atravmatik uçlar
- Nitinol nedeniyle yüksek radyal kuvvet
- Radyopak tantal belirteçleri
- Yeniden yüklenebilir dağıtım sistemi Çalışma uzunluğu 600 mm, OTW Ø 8 mm Kılavuz telini 0,035 inç kabul eder

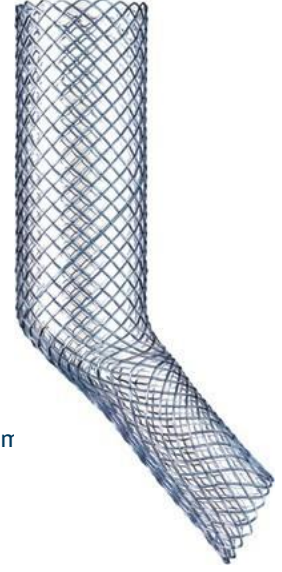

aerstent® TBJ hem iç hem dış yüzeyi tamamen silikon kaplı				
REF	Trakea Ø (mm)	Trakea length (mm)	Bronş Ø (mm)	Bronş length (mm)
533-16-030	16	30	12	30
533-18-040	18	40	14	30
533-20-050	20	50	14	30

Your local contact:

The products in this catalog are CE-marked.



Please note that only the instructions for use enclosed with the respective product apply. Details in this catalogue about the use of products serve as a guide only and reflect the information available at the time of print. If necessary, please request a current version!



Körfez Mah. Atatürk Bulv. No:9 Atakum / SAMSUN
(Kurupelit Grand Atakum Otel Hizası)

Tel: 0 362 438 06 50 Gsm: 0 538 595 57 50
www.diateksaglik.com.tr diatek@diateksaglik.com.tr



bess pro gmbh — Leufen Division, Berlin, Germany

www.leufen-medical.eu